

TEKNİK VERİLER

Entra B 20 | 10 miniRITE T R

Bernafon Entra B, Hybrid Technology™ özelliğine sahip bir işitme cihazıdır. miniRITE T R, doğrudan ses akışı da dahil olmak üzere gün boyu kullanım için güç sağlayan, lityum-iyon pilli, kullanımı kolay, şarj edilebilir bir işitme cihazıdır. Hafif dereceden, çok ileri dereceye kadar işitme kaybı kullanıcılar için tasarlanmış

hoparlörü kulak içinde olan bir işitme cihazıdır. Bluetooth® Low Energy ve NFMI teknolojilerine, bir Telecoil'e, ses seviyesi ve program değişimi için iki basma düğmesine sahiptir. miniRITE T R, dört güç seviyesi, çeşitli kubbeler ve kişisel kalıplar içeren miniFit hoparlör sistemi ile kullanılır.

60 Hoparlör



MNR T R

85 Hoparlör



MNR T R

100 Hoparlör



MNR T R

105 Hoparlör



MNR T R

Teknik özellikler

- Doğrudan ses akışı¹
- Hands-free iletişim²
- Bluetooth Low Energy teknolojisi
- NFMI (Yakın Alan Manyetik İndüksiyonu)
- İkili basma düğmesi
- Telecoil
- miniFit hoparlörler
- Hidrofobik kaplama
- LED gösterge

Aksesuarlar

- Bernafon App
- RC-A (uzaktan kumanda)
- TV-A (TV adaptörü)
- SoundClip-A
- Charger miniRITE T R
- Charger Plus miniRITE T R

Genel özellikler:

- Dijital Programlanabilir
- Otomatik veya manuel ses kontrolü
- Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi
- MPO-Maksimum Güç Çıkışı
- GC-Kazanç kontrolü
- AGC-Otomatik kazanç kontrolü
- Gürültü azaltıcı
- Feedback yönetimi
- Çift mikrofona
- FM Uyumlu (Telecoil ile)
- 4 Programlı
- 48 kanallı

Uyumluluk hakkında bilgi için lütfen ziyaret edin: www.bernafon.com/compatibility

Kullanım ve şarj koşulları
Sıcaklık: +5°C ile +40°C (41°F ile 104°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Taşıma ve saklama koşulları
Sıcaklık ve nem, nakliye ve depolama sırasında uzun süreler için belirtilen sınırları aşmamalıdır:

Taşıma
Sıcaklık: -20°C ile +60°C (-4°F ile 140°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Saklama
Sıcaklık: -20°C ile +30°C (-4°F ile 86°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

1) iPhone, iPad, Mac ve belirli Android cihazlardan
2) Hands-free iletişim belirli cihazlar için geçerlidir

UYARI: Bu ekipmanın modifiye edilmesine izin verilmez.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad, Mac ve Mac logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Made for Apple etiketinin kullanımı, bir aksesuarın özellikle etiketinde belirtilen Apple ürünlerine bağlanmak üzere tasarlandığını ve geliştiricinin Apple performans standartlarını karşıladığı konusunda onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve düzenleme standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir. Android™, Google LLC. şirketinin tescilli hizmet markasıdır.




IP68




İŞBU BELGE, ASLINDAN FOTOKOPİ - FAX - METNİNDEN
TARAFIMIZDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah B. YEMİNLİ MÜTERCİM

Uygulama alanları


Bernafon Entra B 20 | 10

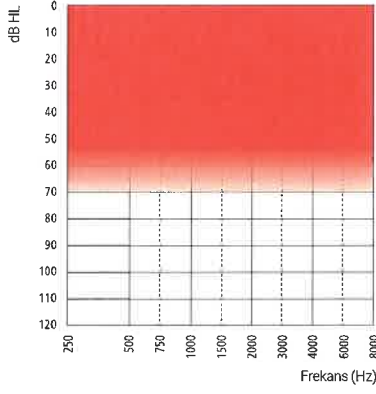


60

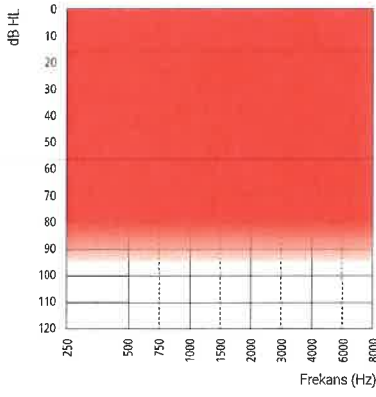

85

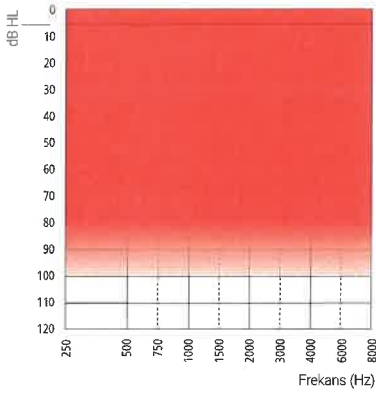

100

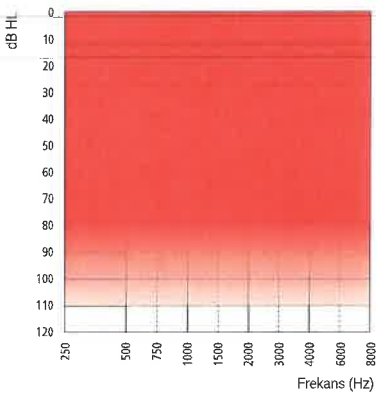

105

İSBU BELGE ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Bernafon B 20YEMİNLİ MÜTERCİM

Özellikler

	Entra B 20	Entra B 10
Hybrid Technology™		
Hybrid Sound Processing™	•	•
Frekans aralığı	8 kHz	8 kHz
Konuşma Dengeleyicisi	•	•
Hybrid Noise Management™	•	•
Akıllı Gürültü Azaltma	3 seçenek	2 seçenek
Akıllı Direksiyonalite	4 seçenek	3 seçenek
Hybrid Feedback Canceller™	•	•
Konuşma		
Alçak Frekans Artırıcısı	•	•
Frequency Composition™	•	•
Konfor		
Geçici Gürültü Azaltma	2 seçenek	—
Rüzgar Gürültüsü Yöneticisi	•	•
Hafif Gürültü Yöneticisi	•	•
Direksiyonalite kontrolleri		
Dinamik	•	—
Adaptif Tam Direksiyonalite	•	•
Sabit Direksiyonalite	•	•
Sabit Omni	•	•
Kişiselleştirme		
Kişiselleştirme	•	•
Uygulama bantları	14	12
Program seçenekleri/hafızada	10/4	8/4
Müzik Deneyimi	•	—
Çift taraflı Koordinasyon: Ses kontrolü, program değiştirme	•	•
Otomatik Adaptasyon Yöneticisi	•	•
Geçiş	•	•
Veri kaydı	•	•
Tinnitus SoundSupport	•	•
CROS uyumluluğu	•	•

İŞBU BELGE, ASLINDAN FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah B. YEMİNLİ MÜTERCİM

Entra B 20 | 10 miniRITE T R







Kulak simülâtörü

IEC 60118-0 /A1:1994,
IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-0:2015 ve
IEC 60318-4:2010'a göre ölçülmüştür.



Teknik bilgiler
Aksi belirtilmedikçe omni direksiyonalite
modu kullanılır.

60 Hoparlör / 100
— Akustik giriş: 60 dB SPL
--- Manyetik giriş: 31,6 mA/m
85 Hoparlör / 105
— Akustik giriş: 60 dB SPL
--- Manyetik giriş: 31,6 mA/m

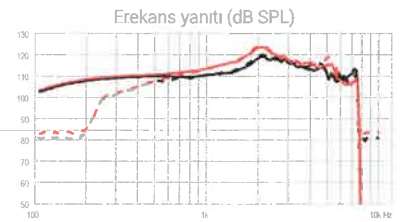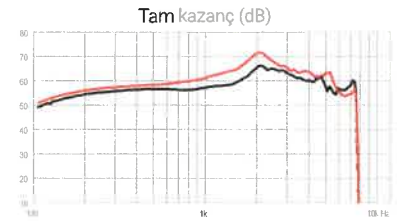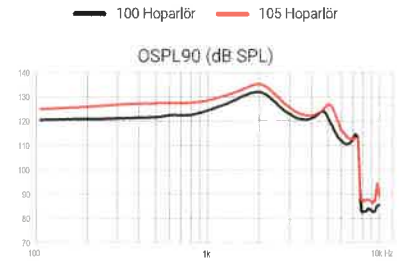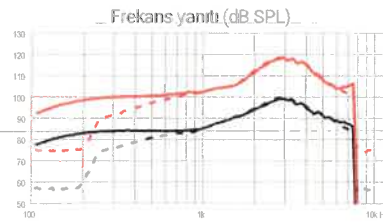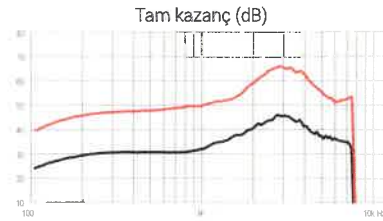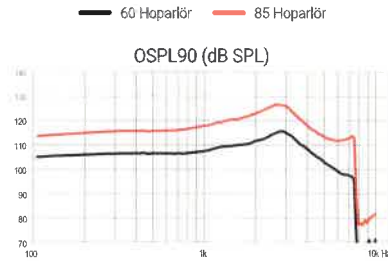

	60 Hoparlör	85 Hoparlör	100 Hoparlör	105 Hoparlör
OSPL90, Pık (dB SPL)	116	127	132	135
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	110	121	130	133
OSPL90, HFA (dB SPL)	110	122	127	131
Tam kazanç, Pık (dB) ¹	46	66	66	72
Tam kazanç, 1600 Hz (dB) ¹	37	53	60	66
Tam kazanç, HFA (dB) ¹	38	56	61	65
Referans test kazancı (dB)	31	46	53	58
Frekans aralığı (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Telecoil çıkışı, 1 mA/m alan (1600 Hz) (dB SPL)	68	84	91	96
Telecoil çıkışı, 10 mA/m alan (1600 Hz) (dB SPL)	88	104	111	116
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 500 Hz (%)	<2	<2	<9	<2
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 800 Hz (%)	<3	<4	<6	<2
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 1600 Hz (%)	<2	<5	<3	<4
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, Omni (dB SPL)	19	22	17	16
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, Dir (dB SPL)	26	29	26	25
Pil	Lityum-iyon	Lityum-iyon	Lityum-iyon	Lityum-iyon
Beklenen kullanım süresi, saat ²	24	24	24	24

İŞBU BELGE, ASLINDAN FOTOKOPİ FAX METNİNDEN
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Enrah Baka YEMİNLİ MÜTERCİM

- 1) Tam kazanç, işitme cihazının kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdan eksi 20dB ayarına göre ve 70dB'lık bir SPL girdisiyle ölçülmüştür. Bu ölçüm şekli, feedback etkisi olmadan örneğin; IEC 60118-0+A1:1994'den tam kazanç yanıtına eşdeğer bir kazanç yanıtı elde etmek için uygulanmıştır.
- 2) Ölçüm durağın modda gerçekleştirildi. Şarj edilebilir pil için beklenen kullanım süresi, kullanım şekline, etkin özellik grubuna, işitme kaybına, ses ortamına, pilin yaşına ve kablosuz aksesuarların kullanımına bağlıdır.

Entra B 20 | 10 miniRITE T R

2CC Coupler

ANSI S3.22: 2014,
IEC 60118-0:2015 ve IEC 60318-5:2006'ya göre
ölçülmüştür









Teknik bilgiler

Aksi belirtilmedikçe omni direksiyonallite
modu kullanılır.

60 Hoparlör / 100
Akustik giriş: 60 dB SPL
Manyetik giriş: 31,6 mA/m

85 Hoparlör / 105
Akustik giriş: 60 dB SPL
Manyetik giriş: 31,6 mA/m

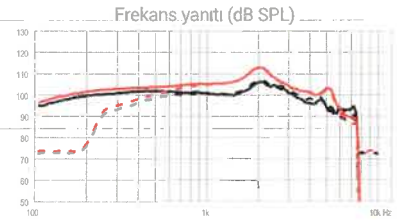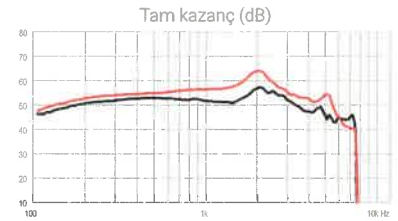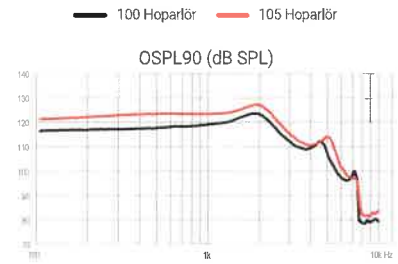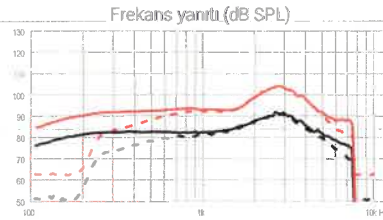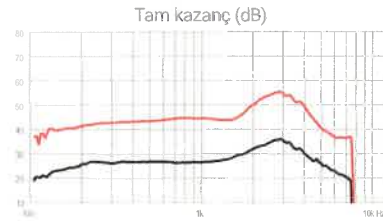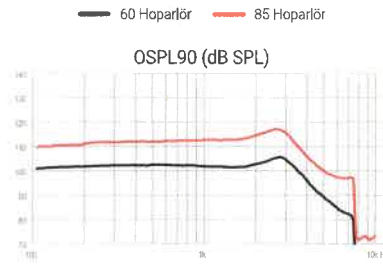

	60 Hoparlör	85 Hoparlör	100 Hoparlör	105 Hoparlör
OSPL90, Pık (dB SPL)	106	117	124	127
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	102	113	122	126
OSPL90, HFA (dB SPL)	103	114	120	123
Tam kazanç, Pık (dB) ¹	36	55	57	64
Tam kazanç, 1600 Hz (dB) ¹	29	45	52	59
Tam kazanç, HFA (dB) ¹	30	48	53	58
Referans test kazancı (dB)	26	37	42	47
Frekans aralığı (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Telecoil çıkışı, 1 mA/m alan (1000 Hz) (dB SPL)	55	74	83	86
Telecoil çıkışı, HFA SPLITS L/R (dB SPL)	83	94	100	104
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 500 Hz (%)	<2	<2	<2	<2
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 800 Hz (%)	<2	<2	<2	<2
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 65 dB SPL), 1600 Hz (%)	<2	<2	<2	<2
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, Omni (dB SPL)	17	18	17	16
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, Dir (dB SPL)	29	27	29	28
Pil	Lityum-iyon	Lityum-iyon	Lityum-iyon	Lityum-iyon
Beklenen kullanım süresi, saat ²	24	24	24	24

İŞBU BELGE ASLINDAN FOTOKOPİ FAX METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Dışarıdan BİLE YEMİNLİ MÜTERCİM

- 1) Tam kazanç, işitme cihazın kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdan eksi 20dB ayarına göre ve 70dB'lik bir SPL girdisiyle ölçülmüştür. Bu ölçüm şekli, feedback etkisi olmadan örneğin; IEC 60118-0+A1:1994'den tam kazanç yanıtına eşdeğer bir kazanç yanıtı elde etmek için uygulanmıştır.
- 2) Ölçüm durağın modda gerçekleştirildi. Şarj edilebilir pil için beklenen kullanım süresi, kullanım şekline, etkin özellik grubuna, işitme kaybına, ses ortamına, pilin yaşına ve kablosuz aksesuarların kullanımına bağlıdır.

Notlar

ISSU BELGE ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, MEKNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah B. YEMİNLİ MÜTERCİM

Notlar

İŞBU BELGE ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
D. Arçhan B. Ke. YEMİNLİ MÜTERCİM

 SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka

www.bernafon.com


İŞBU BELGE ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Bate YEMİNLİ MÜTERCİM

Bernaфон is part of the Demant Group.

 **Bernaфон**

TECHNICAL DATA

Entra B 20 | 10 miniRITE T R

Bernafon Entra B is a hearing instrument with Hybrid Technology™. The miniRITE T R is an easy-to-use, rechargeable hearing instrument with a lithium-ion battery to provide power for a full day of use, including direct audio streaming. It is a receiver-in-the-ear hearing instrument designed for users with

slight to profound hearing losses. It includes Bluetooth® Low Energy and NFMI technology, a telecoil, and double push-button for volume and program changes. The miniRITE T R is available with the miniFit speaker system, which includes four power levels and a variety of domes and custom molds.

Speaker 60



MNR T R

Speaker 85



MNR T R

Speaker 100



MNR T R

Speaker 105



MNR T R

Technical features

- Direct audio streaming¹
- Hands-free communication²
- Bluetooth Low Energy technology
- NFMI (Near-Field Magnetic Induction)
- Double push-button
- Telecoil
- miniFit speakers
- Hydrophobic coating
- LED visual indicator

Accessories

- Bernafon App
- RC-A (remote control)
- TV-A (TV adapter)
- SoundClip-A
- Charger miniRITE T R
- Charger Plus miniRITE T R

General features:

- Digital Programmable
- Automatic or Manual Volume Control
- Maximum Output Control System
- MPO-Maximum Power Output
- GC-Gain Control
- AGC-Automatic Gain Control
- Noise Reduction
- Feedback Management
- Dual Microphone
- FM Compatible (with Telecoil)
- 4 Programs
- 48 channels

For information on compatibility, please visit www.bernafon.com/compatibility

Operating and charging conditions

Temperature: +5°C to +40°C (41°F to 104°F)
Humidity: 5% to 93% relative humidity, non-condensing
Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

Transportation and storage conditions

Temperature and humidity shall not exceed the mentioned limits for extended periods during transportation and storage.

Transport

Temperature: -20°C to +60°C (-4°F to 140°F)
Humidity: 5% to 93% relative humidity, non-condensing
Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

Storage

Temperature: -20°C to +30°C (-4°F to 86°F)
Humidity: 5% to 93% relative humidity, non-condensing
Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

1) From iPhone, iPad, Mac and select Android devices

2) Hands-free communication is available on select devices

WARNING: No modification of this equipment is allowed.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Android™ is a trademark of Google LLC.




IP68

İSBU BELGE ASLINDAN FOTOKOPI - FAX METNİNDEN
TARAFIMIZDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah B. YEMİNLİ MÜTERCİM




Fitting ranges


Bernafon Entra B 20 | 10

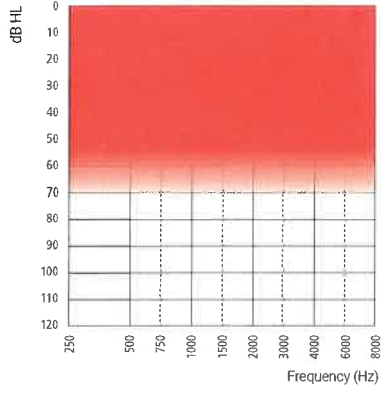


60

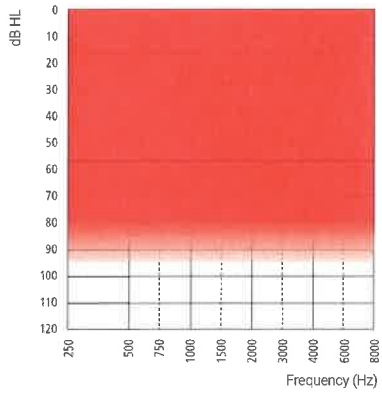

85

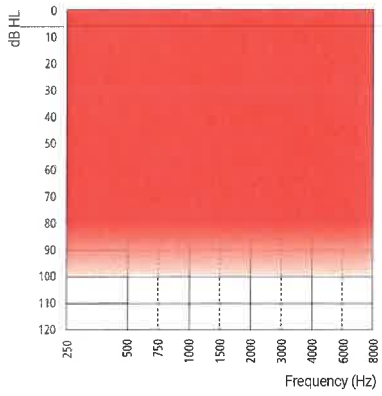

100

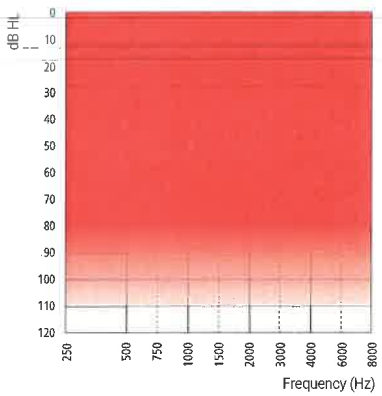

105

İŞBU BELGE ASLINDAN FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Bile YEMİNLİ MÜTERCİM

Feature overview

	Entra B 20	Entra B 10
Hybrid Technology™		
Hybrid Sound Processing™	•	•
Frequency bandwidth	8 kHz	8 kHz
Speech Balancer	•	•
Hybrid Noise Management™	•	•
Smart Noise Reduction	3 options	2 options
Smart Directionality	4 options	3 options
Hybrid Feedback Canceller™	•	•
Speech		
Low Frequency Enhancer	•	•
Frequency Composition™	•	•
Comfort		
Transient Noise Reduction	2 options	—
Wind Noise Manager	•	•
Soft Noise Manager	•	•
Directionality controls		
Dynamic	•	—
Adaptive Full Directionality	•	•
Fixed Directionality	•	•
Fixed Omni	•	•
Individualisation		
Personalisation	•	•
Fitting bands	14	12
Program options/memories	10/4	8/4
Music Experience	•	—
Binaural coordination: VC, program change	•	•
Automatic Adaptation Manager	•	•
Transition	•	•
Data Logging	•	•
Tinnitus SoundSupport	•	•
CROS compatibility	•	•

İŞBU BELGE ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah B. YEMİNLİ MÜTERCİM







Entra B 20 | 10 miniRITE T R

Ear Simulator

Measured according to IEC 60118-0 /A1:1994,
IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-0:2015 and
IEC 60318-4:2010.



Technical information
Omnidirectional mode is used
unless otherwise stated.

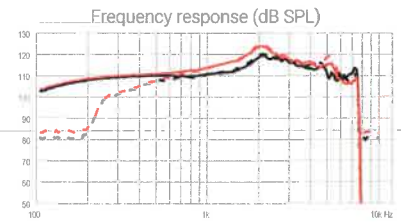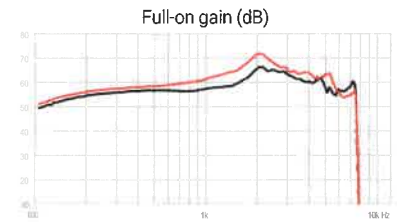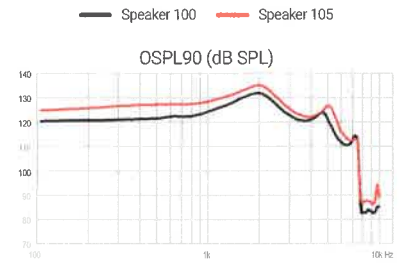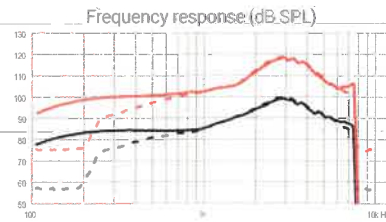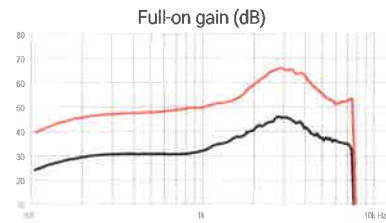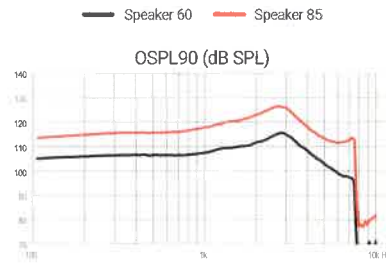

— Speaker 60 / 100
— Acoustic input: 60 dB SPL
--- Magnetic input: 31.6 mA/m

— Speaker 85 / 105
— Acoustic input: 60 dB SPL
--- Magnetic input: 31.6 mA/m

	Speaker 60	Speaker 85	Speaker 100	Speaker 105
OSPL90, Peak (dB SPL)	116	127	132	135
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	110	121	130	133
OSPL90, HFA (dB SPL)	110	122	127	131
Full-on gain, Peak (dB) ¹	46	66	66	72
Full-on gain, 1600 Hz (dB) ¹	37	53	60	66
Full-on gain, HFA (dB) ¹	38	56	61	65
Reference test gain (dB)	31	46	53	58
Frequency range (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Telecoil output, 1 mA/m field (1600 Hz) (dB SPL)	68	84	91	96
Telecoil output, 10 mA/m field (1600 Hz) (dB SPL)	88	104	111	116
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 500 Hz (%)	<2	<2	<9	<2
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 800 Hz (%)	<3	<4	<6	<2
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 1600 Hz (%)	<2	<5	<3	<4
Equivalent input noise level, Omni (dB SPL)	19	22	17	16
Equivalent input noise level, Dir (dB SPL)	26	29	26	25
Battery	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Expected operating time, hours ²	24	24	24	24

İŞBU BELGE, ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX METNİNDEN
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Enrah B 20 YEMİNLİ MÜTERCİM

- 1) Full-on gain is measured with the gain control of the hearing instruments set to its full-on position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB. This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from e.g. IEC 60118-0+A1:1994 but without influence of feedback.
- 2) Measurement is done in quiescent mode. Expected use time for rechargeable battery depends on use pattern, active feature set, hearing loss, sound environment, battery age and use of wireless accessories.

Entra B 20 | 10 miniRITE T R

2CC Coupler







Measured according to ANSI S3.22: 2014,
IEC 60118-0:2015 and IEC 60318-5:2006.



Technical information
Omnidirectional mode is used
unless otherwise stated.

Speaker 60 / 100
— Acoustic input: 60 dB SPL
--- Magnetic input: 31.6 mA/m

Speaker 85 / 105
— Acoustic input: 60 dB SPL
--- Magnetic input: 31.6 mA/m

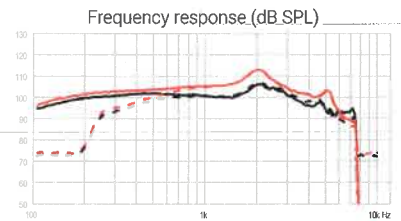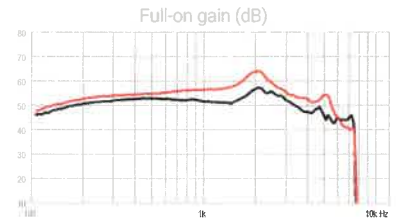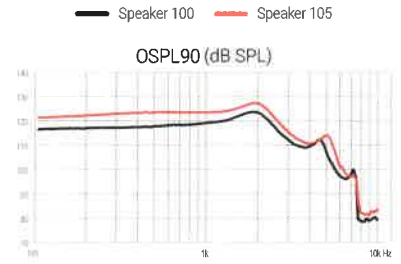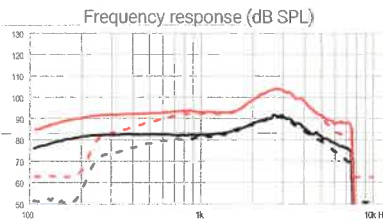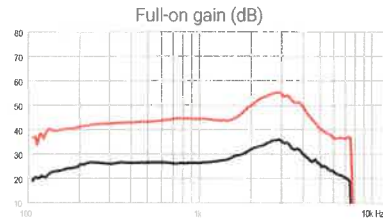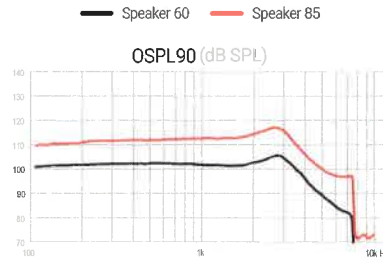

	Speaker 60	Speaker 85	Speaker 100	Speaker 105
OSPL90, Peak (dB SPL)	106	117	124	127
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	102	113	122	126
OSPL90, HFA (dB SPL)	103	114	120	123
Full-on gain, Peak (dB) ¹	36	55	57	64
Full-on gain, 1600 Hz (dB) ¹	29	45	52	59
Full-on gain, HFA (dB) ¹	30	48	53	58
Reference test gain (dB)	26	37	42	47
Frequency range (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Telecoil output, 1 mA/m field (1000 Hz) (dB SPL)	55	74	83	86
Telecoil output, HFA SPLITS L/R (dB SPL)	83	94	100	104
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 500 Hz (%)	<2	<2	<2	<2
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 800 Hz (%)	<2	<2	<2	<2
Total harmonic distortion (Input 65 dB SPL), 1600 Hz (%)	<2	<2	<2	<2
Equivalent input noise level, Omni (dB SPL)	17	18	17	16
Equivalent input noise level, Dir (dB SPL)	29	27	29	28
Battery	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Expected operating time, hours ²	24	24	24	24

İŞBU BELGE, ASLINDAN FOTOKOPİ - FAX METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah B. YEMİNLİ MÜTERCİM

- 1) Full-on gain is measured with the gain control of the hearing instruments set to its full-on position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB. This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from e.g. IEC 60118-0+A1:1994 but without influence of feedback.
- 2) Measurement is done in quiescent mode. Expected use time for rechargeable battery depends on use pattern, active feature set, hearing loss, sound environment, battery age and use of wireless accessories.

Notes

İŞBU BELGE, ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Bile YEMİNLİ MÜTERCİM

Notes

İSBU BELGE ASLINDAN FOTOKOPİ - FAX METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Bile YEMİNLİ MÜTERCİM

 SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

www.bernafon.com

İSBU BELGE, ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX - METNİNDEN
TARAFINDAN İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah B. Be YEMİNLİ MÜTERCİM

Berna fon is part of the Demant Group.

