


TEKNİK VERİLER

Entra B 20 | 10

miniRITE T

Bernafon Entra B, Hybrid Technology™ özelliğine sahip bir işitme cihazıdır. miniRITE T, hafif dereceden çok ileri dereceye kadar işitme kayıplı kullanıcılar için tasarlanmış, hoparlörü kulak içinde olan işitme cihazıdır. Akış için Bluetooth® Low

Energy ve NFMI teknolojilerine, bir Telecoil'e, ses seviyesi ve program değişimi için ikili basma düğmesine sahiptir. miniRITE T, dört güç seviyesi, çeşitli kubbeler ve kişisel kalıplar içeren miniFit hoparlör sistemi ile kullanılır.

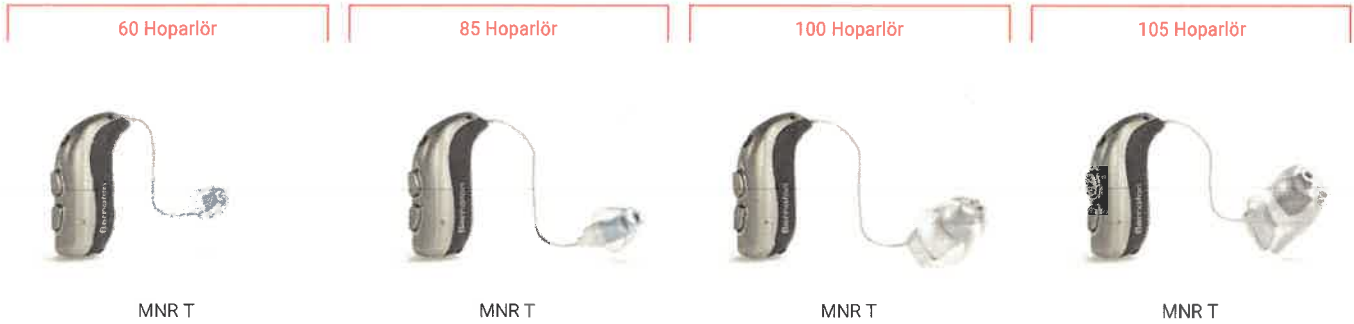

Teknik özellikler

- Doğrudan ses akışı¹
- Hands-free iletişim²
- Bluetooth Low Energy teknolojisi
- NFMI (Yakın Alan Manyetik İndüksiyonu)
- İkili basma düğmesi
- Telecoil
- miniFit hoparlörler
- Hidrofobik kaplama
- LED göstergesi

Aksesuarlar

- Bernafon App
- RC-A (uzaktan kumanda)
- TV-A (TV adaptörü)
- SoundClip-A

Genel özellikler:

- Dijital Programlanabilir
- Otomatik veya manuel ses kontrolü
- Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi
- MPO-Maksimum Güç Çıkışı
- GC-Kazanç kontrolü
- AGC-Otomatik kazanç kontrolü
- Gürültü azaltıcı
- Feedback yönetimi
- Çift mikrofonsuz
- FM Uyumlu (Telecoil ile)
- 4 Programlı
- 48 kanallı

Uyumluluk hakkında bilgi için lütfen ziyaret edin: www.bernafon.com/compatibility

Kullanım ve şarj koşulları
Sıcaklık: +1°C ile +40°C (34°F ile 104°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Taşıma ve saklama koşulları
Sıcaklık ve nem, nakliye ve depolama sırasında uzun süreler için belirtilen sınırları aşmamalıdır.

Taşıma
Sıcaklık: -25°C ile + 60°C (-13°F ile 140°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Saklama
Sıcaklık: -25°C ile + 60°C (-13°F ile 140°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

1) iPhone, iPad, Mac ve belirli Android cihazlardan
2) Hands-free iletişim belirli cihazlar için geçerlidir

UYARI: Bu ekipmanın modifiye edilmesine izin verilmez.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad, Mac ve Mac logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Made for Apple etiketinin kullanımı, bir aksesuarın özellikle etiketinde belirtilen Apple ürünlerine bağlanmak üzere tasarlandığını ve geliştiricinin Apple performans standartlarını karşıladığı konusunda onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve düzenleme standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir.

Android™, Google LLC. şirketinin tescilli hizmet markasıdır.




İŞBU BELGE ASLINDAN FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah BİSTECİ YEMİNLİ MÜTERCİM




Uygulama alanları


Bernafon Entra B 20 | 10

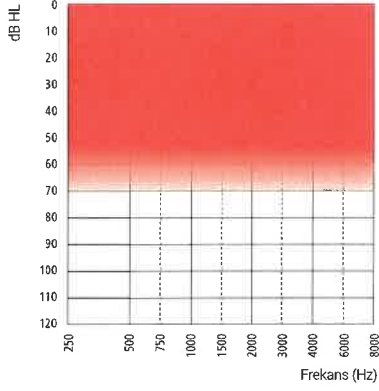


60

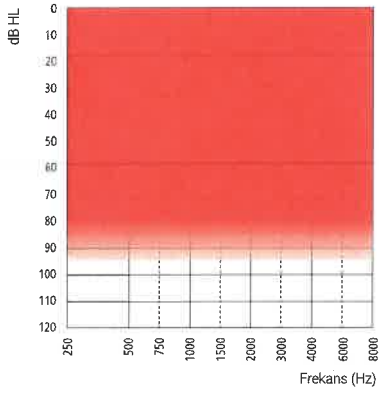

85

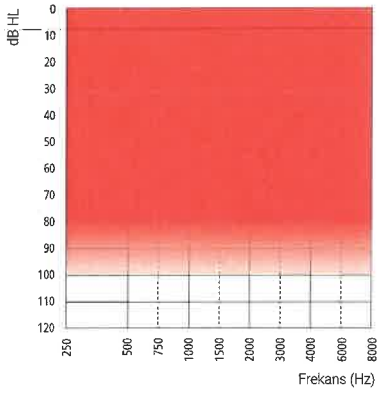

100

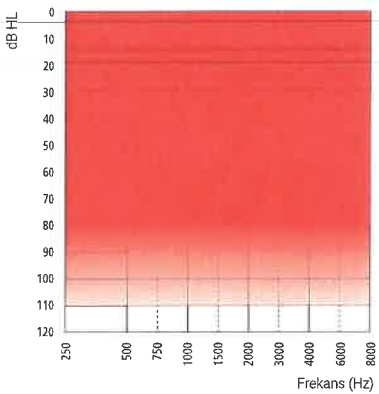

105

İŞBU BELGE, ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFIMIZDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah B. İzzet YEMİNLİ MÜTERCİM

Özellikler

Hybrid Technology™

Hybrid Sound Processing™

Frekans aralığı

Konuşma Dengeleyicisi

Hybrid Noise Management™

Akıllı Gürültü Azaltma

Akıllı Direksiyonlite

Hybrid Feedback Canceller™

Konuşma

Alçak Frekans Artırıcısı

Frequency Composition™

Konfor

Geçici Gürültü Azaltma

Rüzgar Gürültüsü Yöneticisi

Hafif Gürültü Yöneticisi

Direksiyonlite kontrolleri

Dinamik

Adaptif Tam Direksiyonlite

Sabit Direksiyonlite

Sabit Omni

Kişiselleştirme

Kişiselleştirme

Uygulama bantları

Program seçenekleri/hafızada

Müzik Deneyimi

Çift taraflı Koordinasyon: Ses kontrolü, program değiştirme

Otomatik Adaptasyon Yöneticisi

Geçiş

Veri kaydı

Tinnitus SoundSupport

CROS uyumluluğu

Entra B 20

Entra B 10

•

8 kHz

•

•

3 seçenek

4 seçenek

•

•

•

2 seçenek

•

•

•

•

•

•

•

14

10/4

•

•

•

•

•

•

•

•

8 kHz

•

•

2 seçenek

3 seçenek

•

•

•

—

•

•

—

•

•

•

•

12

8/4

—

•

•

•

•

•

•

İŞBU BELGE ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
English Belge YEMİNLİ MÜTERCİM

Entra B 20 | 10 miniRITE T

Kulak simülatörü

IEC 60118-0 /A1:1994,
IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-0:2015 ve
IEC 60318-4:2010'a göre ölçülmüştür









Teknik bilgiler

Aksi belirtilmedikçe omni direksiyonallite
modu kullanılır.

60 Hoparlör / 100
Akustik giriş: 60 dB SPL
Manyetik giriş: 31,6 mA/m

85 Hoparlör / 105
Akustik giriş: 60 dB SPL
Manyetik giriş: 31,6 mA/m

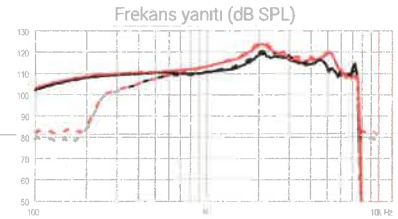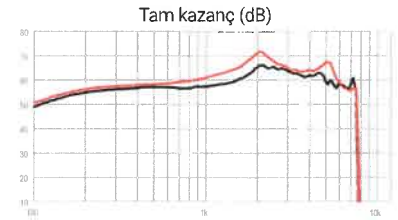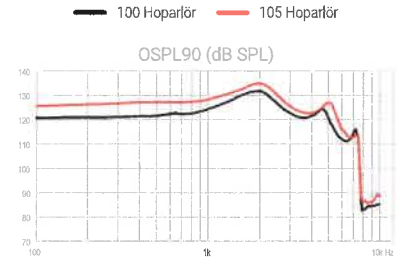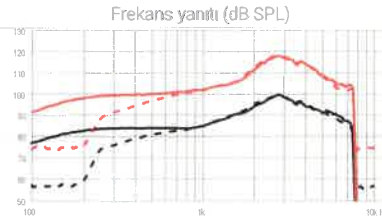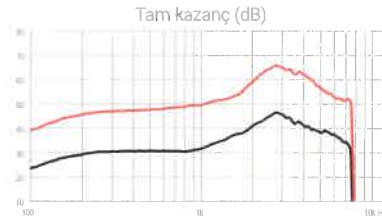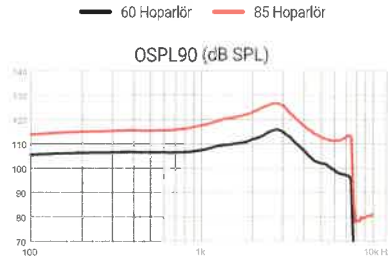

	60 Hoparlör	85 Hoparlör	100 Hoparlör	105 Hoparlör
OSPL90, Pik (dB SPL)	116	127	132	135
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	110	121	130	133
OSPL90, HFA (dB SPL)	111	122	127	131
Tam kazanç, Pik (dB) ¹	46	66	66	72
Tam kazanç, 1600 Hz (dB) ¹	37	53	60	66
Tam kazanç, HFA (dB) ¹	38	56	61	65
Referans test kazancı (dB)	30	46	53	58
Frekans aralığı (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Telecoil çıkışı, 1 mA/m alan (1600 Hz) (dB SPL)	68	84	91	96
Telecoil çıkışı, 10 mA/m alan (1600 Hz) (dB SPL)	88	104	111	116
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 500 Hz (%)	<2	<2	<9	<4
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 800 Hz (%)	<3	<4	<6	<4
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 1600 Hz (%)	<2	<5	<3	<4
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, Omni (dB SPL)	18	21	16	15
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, Dir (dB SPL)	26	28	25	24
Pil tüketimi, Tipik (mA) ²	2,2	2,3	2,2	2,3
Pil tüketimi, Durağın (mA) ²	2,2	2,2	2,2	2,2
Pil ömrü, yapay ölçüm, saat ³	80	75	80	80
Beklenen pil ömrü, saat (pil boyutu 312 - IEC PR41) ⁴	55-60	50-60	50-60	50-60

- 1) İşitme cihazlarının kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdaki ekli 20 dB ayarına göre ve 70 dB'lik bir SPL girdisiyle ölçülmüştür. Bu ölçüm şekli, feedback etkisi olmadan örneğin; IEC 60118-0:1983+A1:1994'den tam kazanç yanıtına eşdeğer bir kazanç yanıtı elde etmek için uygulanmıştır.
- 2) Pil akımı 3 dakikalık yatışma süresinden sonra IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22:2014 §6.13'e göre ölçülmüştür.
- 3) Standartlaştırılmış pil tüketimi ölçümüne dayanmaktadır (örn. IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). Gerçek pil ömrü, pil kalitesine, kullanım şekline, etkin özellik grubuna, işitme kaybına ve ses ortamına bağlıdır.
- 4) Gerçek kullanımda pil ömrü değişken amplifikasyon ayarları ve bir TV'den doğrudan stereo akış (zamanın %25'i) ve bir cep telefonundan akış (zamanın %6'sı) dahil olmak üzere değişken giriş seviyeleri ile karma kullanım durumlarına göre tahmini bir zaman aralığını göstermektedir.

Entra B 20 | 10 miniRITE T

2CC Coupler

ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015 ve IEC 60318-5:2006'ya göre ölçülmüştür.









Teknik bilgiler

Aksi belirtilmedikçe omni direksiyonallite modu kullanılır.

60 Hoparlör / 100
Akustik giriş: 60 dB SPL
Manyetik giriş: 31,6 mA/m

85 Hoparlör / 105
Akustik giriş: 60 dB SPL
Manyetik giriş: 31,6 mA/m

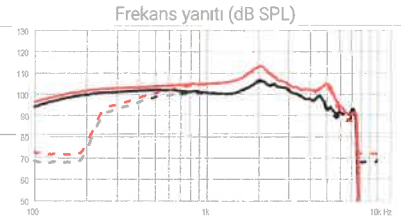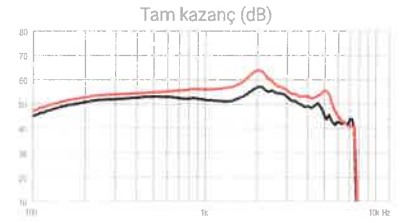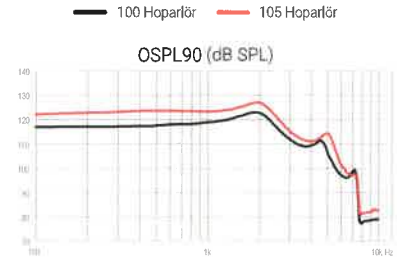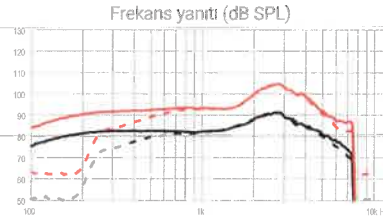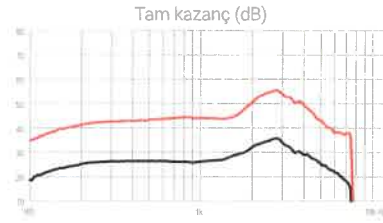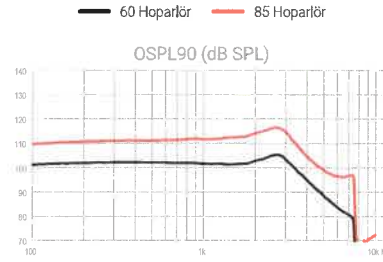

	60 Hoparlör	85 Hoparlör	100 Hoparlör	105 Hoparlör
OSPL90, Pik (dB SPL)	105	117	123	127
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	102	113	122	126
OSPL90, HFA (dB SPL)	103	114	119	123
Tam kazanç, Pik (dB) ¹	36	55	57	64
Tam kazanç, 1600 Hz (dB) ¹	29	45	53	59
Tam kazanç, HFA (dB) ¹	30	48	53	58
Referans test kazancı (dB)	26	37	42	47
Frekans aralığı (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Telecoil çıkışı, 1 mA/m alan (1000 Hz) (dB SPL)	55	74	83	86
Telecoil çıkışı, HFA SPLITS L/R (dB SPL)	85	96	101	106
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 500 Hz (%)	<2	<2	<2	<2
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 800 Hz (%)	<2	<2	<2	<2
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 65 dB SPL), 1600 Hz (%)	<2	<2	<2	<2
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, Omni (dB SPL)	16	17	16	16
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, Dir (dB SPL)	27	27	28	27
Pil tüketimi, Tipik (mA) ²	2,2	2,4	2,3	2,4
Pil tüketimi, Durağın (mA) ²	2,2	2,2	2,2	2,2
Pil ömrü, yapay ölçüm, saat ³	80	75	75	75
Beklenen pil ömrü, saat (pil boyutu 312 - IEC PR41) ⁴	55-60	50-60	50-60	50-60

- 1) İşitme cihazlarının kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdan eksi 20 dB ayarına göre ve 70 dB'lik bir SPL girdisiyle ölçülmüştür. Bu ölçüm şekli, feedback etkisi olmadan örneğin; IEC 60118-0:1983+A1:1994'den tam kazanç yanıtına eşdeğer bir kazanç yanıtı elde etmek için uygulanmıştır.
- 2) Pil akımı 3 dakikalık yatışma süresinden sonra IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22:2014 §6.13'e göre ölçülmüştür.
- 3) Standartlaştırılmış pil tüketimi ölçümüne dayanmaktadır (örn. IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). Gerçek pil ömrü, pil kalitesine, kullanım şekline, etkin özellik grubuna, işitme kaybına ve ses ortamına bağlıdır.
- 4) Gerçek kullanımda pil ömrü değişken amplifikasyon ayarları ve bir TV'den doğrudan stereo akış (zamanın %25'i) ve bir cep telefonundan akış (zamanın %5'i) dahil olmak üzere değişken giriş seviyeleri ile karma kullanım durumlarına göre tahmini bir zaman aralığını göstermektedir.

Notlar

İŞBU BELGE, ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Enoch Bete YEMİNLİ MÜTERCİM

Notlar

İŞBU BELGE ASLINDAN - KOTOKOPİ - FAX - METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Beke YEMİNLİ MÜTERCİM

İŞBU BELGE, ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX - METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah B. YEMİNLİ MÜTERCİM

 SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka

www.bernafon.com

Bernafon is part of the Demant Group.



TECHNICAL DATA

Entra B 20 | 10 miniRITE T

Bernafon Entra B is a hearing instrument with Hybrid Technology™. The miniRITE T is a receiver-in-the-ear hearing instrument designed for users with slight to profound hearing losses. It includes Bluetooth® Low Energy for streaming

and NFMI technology, a telecoil, and double push-button for volume and program changes. The miniRITE T is available with the miniFit speaker system, which includes four power levels and a variety of domes and custom moulds.

Speaker 60



MNR T

Speaker 85



MNR T

Speaker 100



MNR T

Speaker 105



MNR T

Technical features

- Direct audio streaming¹
- Hands-free communication²
- Bluetooth Low Energy technology
- NFMI (Near-Field Magnetic Induction)
- Double push-button
- Telecoil
- miniFit speakers
- Hydrophobic coating
- LED visual indicator

Aksesuarlar

- Bernafon App
- RC-A (remote control)
- TV-A (TV adapter)
- SoundClip-A

General features:

- Digital Programmable
- Automatic or Manual Volume Control
- Maximum Output Control System
- MPO-Maximum Power Output
- GC-Gain Control
- AGC-Automatic Gain Control
- Noise Reduction
- Feedback Management
- Dual Microphone
- FM Compatible (with Telecoil)
- 4 Programs
- 48 channels

Uyumluluk hakkında bilgi için lütfen ziyaret edin: www.bernafon.com/compatibility

Operating and charging conditions

Temperature: +1°C to +40°C (34°F to 104°F)
Humidity: 5% to 93% relative humidity, non-condensing
Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

Transportation and storage conditions

Temperature and humidity shall not exceed the mentioned limits for extended periods during transportation and storage:

Transport

Temperature: -25°C to + 60°C (-13°F to 140°F)
Humidity: 5% to 93% relative humidity, non-condensing
Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

Storage

Temperature: -25°C to + 60°C (-13°F to 140°F)
Humidity: 5% to 93% relative humidity, non-condensing
Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

1) From iPhone, iPad, Mac and select Android devices

2) Hands-free communication is available on select devices

WARNING: No modification of this equipment is allowed.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Android™ is a trademark of Google LLC.




İŞBU BELGE ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX - METNİNDEN
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
YEMİNLİ MÜTERCİM




Fitting ranges


Bernafon Entra B 20 | 10

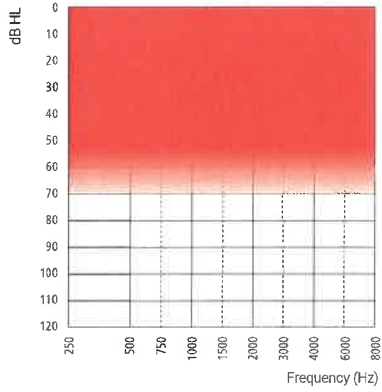


60

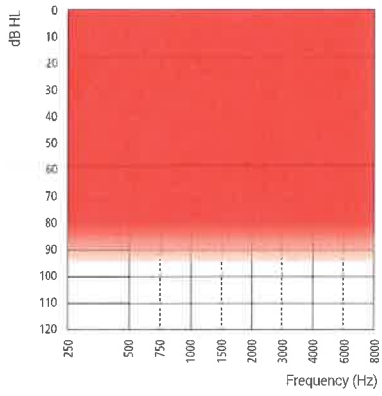

85

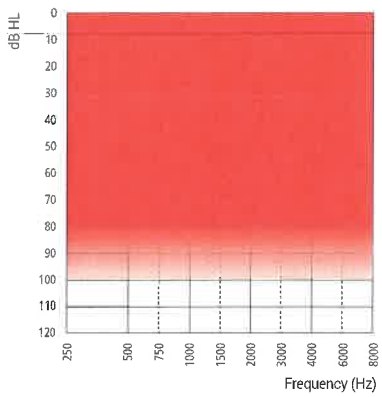

100

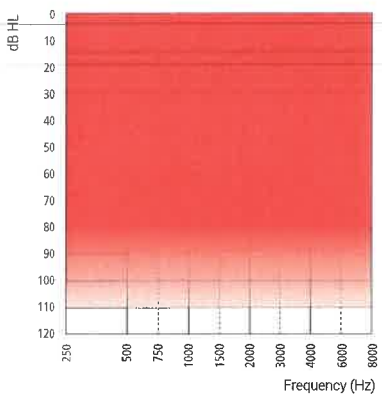

105

İŞBU BELGE ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX METNİNDEN
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah B. Çiçek YEMİNLİ MÜTERCİM

Feature overview

	Entra B 20	Entra B 10
Hybrid Technology™		
Hybrid Sound Processing™	•	•
Frequency bandwidth	8 kHz	8 kHz
Speech Balancer	•	•
Hybrid Noise Management™	•	•
Smart Noise Reduction	3 options	2 options
Smart Directionality	4 options	3 options
Hybrid Feedback Canceller™	•	•
Speech		
Low Frequency Enhancer	•	•
Frequency Composition™	•	•
Comfort		
Transient Noise Reduction	2 options	—
Wind Noise Manager	•	•
Soft Noise Manager	•	•
Directionality controls		
Dynamic	•	—
Adaptive Full Directionality	•	•
Fixed Directionality	•	•
Fixed Omni	•	•
Individualisation		
Personalisation	•	•
Fitting bands	14	12
Program options/memories	10/4	8/4
Music Experience	•	—
Binaural coordination: VC, program change	•	•
Automatic Adaptation Manager	•	•
Transition	•	•
Data Logging	•	•
Tinnitus SoundSupport	•	•
CROS compatibility	•	•

İSBU BELGE, ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
 TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
 Emrah B. YEMİNLİ MÜTERCİM







Entra B 20 | 10 miniRITE T

Ear Simulator

Measured according to IEC 60118-0 /A1:1994,
IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-0:2015 and
IEC 60318-4:2010



Technical information
Omnidirectional mode is used
unless otherwise stated.

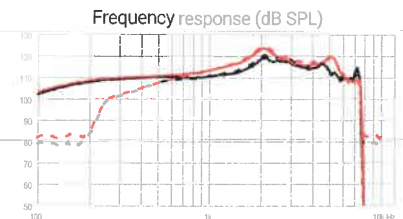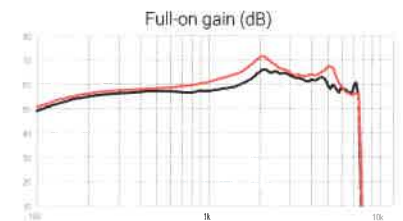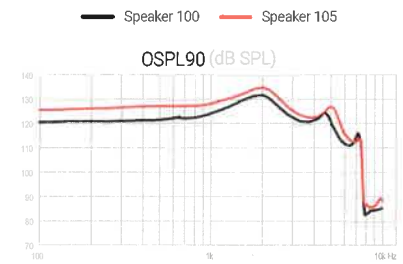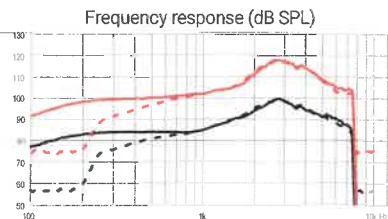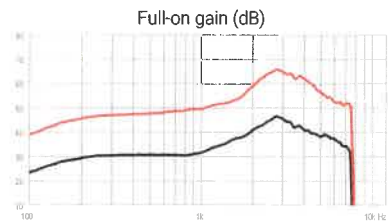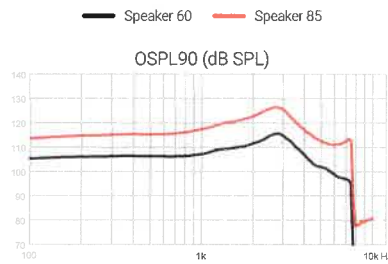

	Speaker 60	Speaker 85	Speaker 100	Speaker 105
OSPL90, Peak (dB SPL)	116	127	132	135
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	110	121	130	133
OSPL90, HFA (dB SPL)	111	122	127	131
Full-on gain, Peak (dB) ¹	46	66	66	72
Full-on gain, 1600 Hz (dB) ¹	37	53	60	66
Full-on gain, HFA (dB) ¹	38	56	61	65
Reference test gain (dB)	30	46	53	58
Frequency range (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Telecoil output, 1 mA/m field (1600 Hz) (dB SPL)	68	84	91	96
Telecoil output, 10 mA/m field (1600 Hz) (dB SPL)	88	104	111	116
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 500 Hz (%)	<2	<2	<9	<4
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 800 Hz (%)	<3	<4	<6	<4
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 1600 Hz (%)	<2	<5	<3	<4
Equivalent input noise level, Omni (dB SPL)	18	21	16	15
Equivalent input noise level, Dir (dB SPL)	26	28	25	24
Battery consumption, Typical (mA) ²	2.2	2.3	2.2	2.3
Battery consumption, Quiescent (mA) ²	2.2	2.2	2.2	2.2
Battery life, artificial measurement, hours ³	80	75	80	80
Expected battery life, hours (battery size 312 - IEC PR41) ⁴	55-60	50-60	50-60	50-60

- 1) Measured with the gain control of the hearing aids set to their full-on position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB. This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994 but without influence of feedback.
- 2) Battery current is measured according to IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 and ANSI S3.22:2014 §6.13 after a settling time of minimum 3 minutes.
- 3) Based on the standardised battery consumption measurement (e.g. IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). The actual battery life depends on battery quality, use pattern, active feature set, hearing loss and sound environment.
- 4) Real usage battery life is shown as an estimated interval based on mixed use cases with variable amplification settings and variable input levels, incl. direct stereo streaming from a TV (25% of the time) and streaming from a mobile phone (6% of the time).







Entra B 20 | 10 miniRITE T

2CC Coupler

Measured according to ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015 and IEC 60318-5:2006.



Technical information
Omnidirectional mode is used unless otherwise stated.

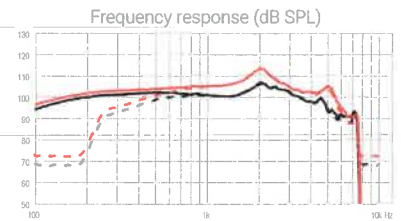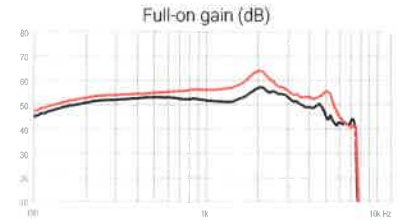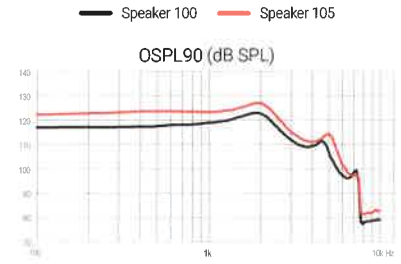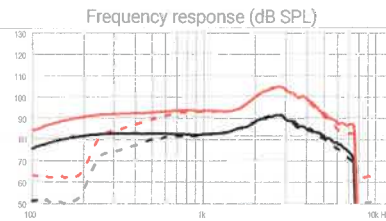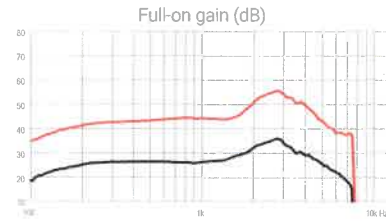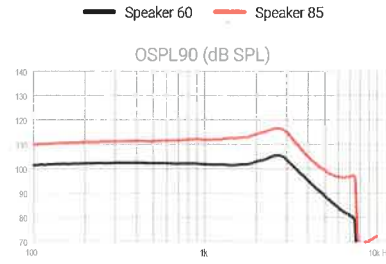

Speaker 60 / 100
— Acoustic input: 60 dB SPL
--- Magnetic input: 31.6 mA/m

Speaker 85 / 105
— Acoustic input: 60 dB SPL
--- Magnetic input: 31.6 mA/m

	Speaker 60	Speaker 85	Speaker 100	Speaker 105
OSPL90, Peak (dB SPL)	105	117	123	127
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	102	113	122	126
OSPL90, HFA (dB SPL)	103	114	119	123
Full-on gain, Peak (dB) ¹	36	55	57	64
Full-on gain, 1600 Hz (dB) ¹	29	45	53	59
Full-on gain, HFA (dB) ¹	30	48	53	58
Reference test gain (dB)	26	37	42	47
Frequency range (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500	100-7500
Telecoil output, 1 mA/m field (1000 Hz) (dB SPL)	55	74	83	86
Telecoil output, HFA SPLITS L/R (dB SPL)	85	96	101	106
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 500 Hz (%)	<2	<2	<2	<2
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 800 Hz (%)	<2	<2	<2	<2
Total harmonic distortion (Input 65 dB SPL), 1600 Hz (%)	<2	<2	<2	<2
Equivalent input noise level, Omni (dB SPL)	16	17	16	16
Equivalent input noise level, Dir (dB SPL)	27	27	28	27
Battery consumption, Typical (mA) ²	2.2	2.4	2.3	2.4
Battery consumption, Quiescent (mA) ²	2.2	2.2	2.2	2.2
Battery life, artificial measurement, hours ³	80	75	75	75
Expected battery life, hours (battery size 312 - IEC PR41) ⁴	55-60	50-60	50-60	50-60

- Measured with the gain control of the hearing aids set to their full-on position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB. This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994 but without influence of feedback.
- Battery current is measured according to IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 and ANSI S3.22:2014 §6.13 after a settling time of minimum 3 minutes.
- Based on the standardised battery consumption measurement (e.g. IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). The actual battery life depends on battery quality, use pattern, active feature set, hearing loss and sound environment.
- Real usage battery life is shown as an estimated interval based on mixed use cases with variable amplification settings and variable input levels, incl. direct stereo streaming from a TV (25% of the time) and streaming from a mobile phone (6% of the time).

Notes

BU BELGE, ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX - METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Bilal YEMİNLİ MÜTERCİM

Notes

İŞBU BELGE, ASLINDAN FOTOKOPİ, FAX, METNİNDEN
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Bate.....YEMİNLİ MÜTERCİM

 SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

www.bernafon.com

İŞBU BELGE, ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
 Garip B. Ste..... YEMİNLİ MÜTERCİM

Bernafon is part of the Demant Group.

 **Bernafon**