

Teknik veriler

Oticon Jet PX 1 | 2 miniBTE T

İŞBU BELGE ASLINDAN FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Bilel YEMİNLİ MÜTERCİM

Oticon Jet PX miniBTE T küçüktür ve çoğu kulağa oturur. Kolay kullanım için bir LED ışıkla birlikte gelir. Bu modelde telecoil ve tekli basma düğmesi bulunur ve tek kullanımlık bir çinko-hava pil ile çalıştırılır. Made for iPhone işitme

cihazı olup, Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) için Android protokolü ile uyumludur - iPhone, iPad, Mac ve belirli Android™ cihazlardan doğrudan ses akışını mümkün kılar.

Boynuz



miniBTE T

Corda miniFit 1.3 mm



miniBTE T

Corda miniFit 0.9 mm



miniBTE T

Teknik özellikler

- › Hands-free iletişim¹
- › Doğrudan akış²
- › Bluetooth Low Energy teknolojisi
- › NFMİ (Yakın Alan Manyetik İndüksiyonu)
- › Telecoil
- › Hidrofobik kaplama
- › Corda miniFit

Aksesuarlar

- › Oticon Companion app
- › ConnectClip
- › EduMic
- › TV Adapter 3.0
- › Phone Adapter 2.0

Genel özellikler:

- › Dijital Programlanabilir
- › Otomatik veya manuel ses kontrolü
- › Maksimum Çıkış Kontrol Sistemi
- › MPO-Maksimum Güç Çıkışı
- › GC-Kazanç kontrolü
- › AGC-Otomatik kazanç kontrolü
- › Gürültü azaltıcı
- › Feedback yönetimi
- › Çift mikrofona
- › FM uyumlu (Telecoil ile)
- › 4 Programlı

Uyumluluk hakkında bilgi için lütfen www.oticon.global/compatibility adresini ziyaret edin

Çalışma ve şarj koşulları
Sıcaklık: +1°C ile +40°C (34°F ile 104°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmaz
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa


Taşıma ve saklama koşulları
Sıcaklık ve nem, nakliye ve depolama sırasında uzun süreler için belirtilen sınırları aşmamalıdır:

Taşıma
Sıcaklık: -25°C ile +60°C (-13°F ile 140°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmaz
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Saklama
Sıcaklık: -25°C ile +60°C (-13°F ile 140°F)
Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmaz
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa


1) Hands-free iletişim belirli cihazlar için geçerlidir
2) iPhone, iPad, Mac ve belirli Android cihazlardan

UYARI: Bu ekipman üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir. Apple, Apple logosu, iPhone, iPad, Mac ve Mac logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Made for Apple etiketinin kullanımı, bir aksesuarın özellikler etiketinde belirtilen Apple ürünlerine bağlanmak üzere tasarlandığını ve geliştiricinin Apple performans standartlarını karşıladığı konusunda onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve düzenleme standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir. Android™, Google LLC şirketinin tescilli hizmet markasıdır.

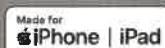

Uygulama alanları

Oticon Jet PX 1 | 2

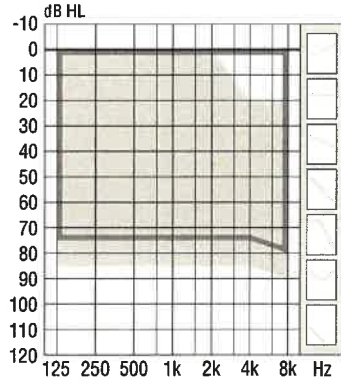

85

Boynuz

Corda minifit

İŞBU BELGE, ASLINDAN FOTOKOPLANAN FAX METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Bile YEMİNLİ MÜTERCİM

Özelliklere genel bakış

Konuşmayı anlama

OpenSound Navigator™	•	–
Güç etkisini dengeleme	%40	–
Maks. gürültü giderme karmaşık/basit	6 dB / 0 dB	–
Çok Bantlı Adaptif Direksiyonalite	–	•
Gürültü Azaltma	–	•
Speech Guard™	•	–
Tekli Sıkıştırma	–	•
Frekans alçaltma	Speech Rescue™	Speech Rescue™

Ses kalitesi

Uygulama Bant Genişliği ¹	8 kHz	8 kHz
Güçlü Bas Etkisi (akış)	•	•
İşleme Kanalları	48	48

Dinleme konforu

Feedback Yönetimi	SuperShield-ve Feedback kalkanı	SuperShield-ve Feedback kalkanı
Geçici Gürültü Yönetimi	Açık/Kapalı	–
Rüzgâr Gürültüsü Yönetimi	•	•

Kişiselleştirme ve optimize edilmiş uygulama

Uygulama Bantları	14	12
Birden Fazla Direksiyonalite seçeneği	•	•
Adaptasyon Yönetimi	•	•
Uygulama Formülleri	NAL-NL1/ NAL- NL2, DSL v5	NAL-NL1/ NAL- NL2, DSL v5

Dünya ile bağlantı

Hands-free iletişim ²	•	•
Doğrudan akış ³	•	•
Oticon Companion app	•	•
ConnectClip	•	•
EduMic	•	•
Remote Control 3.0	•	•
TV Adapter 3.0	•	•
Phone Adapter 2.0	•	•
Tinnitus SoundSupport™	•	•
CROS/BICROS desteği	•	•

İŞBU BELGE, ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Beke YEMİNLİ MÜTERCİM

1) Uygulama sırasında kazanç ayarları için erişilebilir bant genişliği

2) Hands-free iletişim belirli cihazlar için geçerlidir

3) iPhone, iPad, Mac ve belirli Android cihazlardan

Oticon Jet PX 1 | 2 miniBTE T

Kulak Simulatörü






IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015,
IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ve IEC 60318-
4:2010'a göre ölçülmüştür



Teknik bilgiler
Aksi belirtilmedikçe omni direksiyonlile
modu kullanılır.

Boynuz/ Corda miniFit 1,3
— Akustik giriş: 60 dB SPL
--- Manyetik giriş: 31,6 mA/m

Corda miniFit 0,9
— Akustik giriş: 60 dB SPL
--- Manyetik giriş: 31,6 mA/m

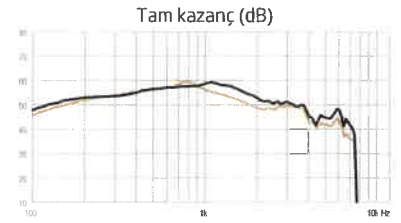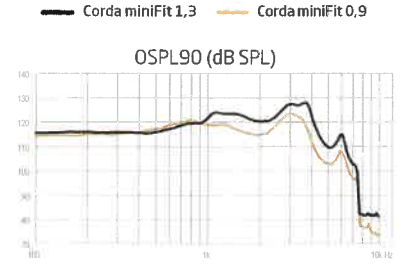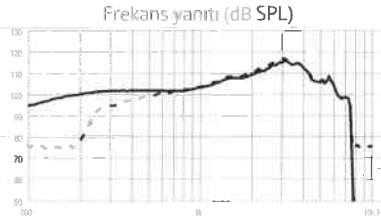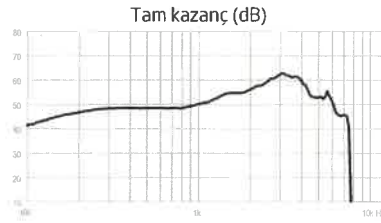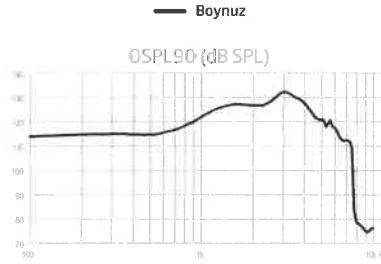

	Boynuz	Corda miniFit 1,3	Corda miniFit 0,9
OSPL90, Maks. (dB SPL)	132	128	123
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	127	123	116
OSPL90, HFA (dB SPL)	126	122	118
Tam kazanç, Maks. (dB) ¹	63	59	59
Tam kazanç, 1600 Hz (dB) ¹	55	56	52
Tam kazanç, HFA (dB) ¹	55	55	52
Referans test kazancı (dB)	48	47	41
Frekans aralığı (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500
Telecoil çıkışı, 1 mA/m alan (1600 Hz) (dB SPL)	86	88	87
Telecoil çıkışı, 10 mA/m alan (1600 Hz) (dB SPL)	106	*	*
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 500 Hz (%)	<4	<5	<3
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 800 Hz (%)	<4	<2	<2
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 1600 Hz (%)	<2	<2	<3
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, Omni (dB SPL)	18	15	19
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, Dir (dB SPL)	28	*	*
Pil tüketimi, Tipik (mA) ²	1,9	2,0	2,0
Pil tüketimi, Durağın (mA) ²	1,9	1,9	1,9
Pil ömrü, yapay ölçüm, saat ³	95	90	90
Beklenen pil ömrü, saat (pil boyutu 312 - IEC PR41) ⁴	50-55	*	*

* Hiçbir ölçüm gerçekleştirilmedi.

1) İşitme cihazlarının kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdan eksi 20 dB ayarına göre ve 70 dB'lik bir SPL girdisiyle ölçülmüştür. Bu ölçüm şekli, feedback etkisi olmadan örneğin; IEC 60118-0:1983+A1:1994'den tam kazanç yanıtına eşdeğer bir kazanç yanıtı elde etmek için uygulanmıştır.

2) Pil akımı 3 dakikalık yatışma süresinden sonra IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22:2014 §6.13'e göre ölçülmüştür.

3) Standartlaştırılmış pil tüketimi ölçümüne dayanmaktadır (örn. IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). Gerçek pil ömrü, pilin kalitesine, kullanın şekline, etkin özellikli kurulumuna, işitme kaybına ve ses çevresine bağlıdır.

4) Gerçek kullanımda pil ömrü değişken amplifikasyon ayarları ve bir TV'den doğrudan stereo akış (zamanın %25'i) ve bir cep telefonundan akış (zamanın %6'sı) dahil olmak üzere değişken giriş seviyeleri ile karma kullanım durumlarına göre tahmini bir zaman aralığını göstermektedir.

Oticon Jet PX 1 | 2 miniBTE T

İŞBU BELGE ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Günel Bebe YEMİNLİ MÜTERCİM

2CC Coupler



ANSI S3.22-2014,
IEC 60118-0:2015 ve IEC 60318-5:2006'ya göre
ölçülmüştür



Teknik bilgiler
Aksi belirtilmedikçe omni direksiyonallite
modu kullanılır.

Boynuz / Corda miniFit 1,3
— Akustik giriş: 60 dB SPL
--- Manyetik giriş: 31,6 mA/m

Corda miniFit 0,9
— Akustik giriş: 60 dB SPL
--- Manyetik giriş: 31,6 mA/m

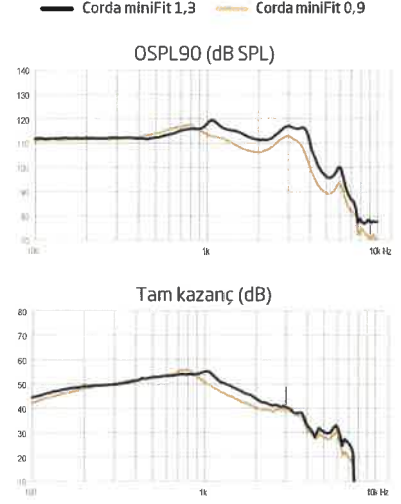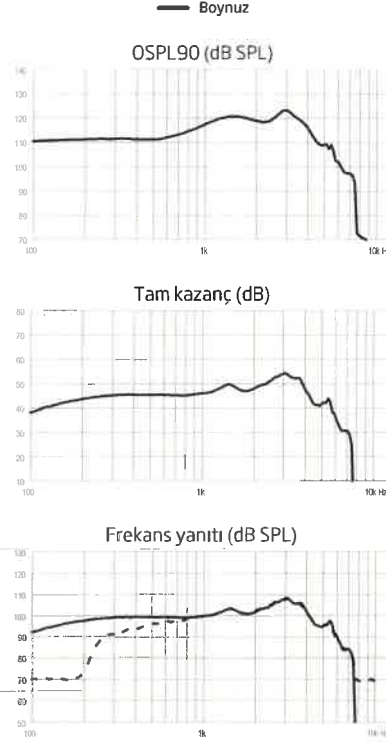

	Boynuz	Corda miniFit 1,3	Corda miniFit 0,9
OSPL90, Maks. (dB SPL)	123	119	117
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	121	114	108
OSPL90, HFA (dB SPL)	119	115	110
Tam kazanç, Maks. (dB) ¹	54	55	56
Tam kazanç, 1600 Hz (dB) ¹	48	48	44
Tam kazanç, HFA (dB) ¹	48	48	44
Referans test kazancı (dB)	42	37	34
Frekans aralığı (Hz)	100-7300	100-6300	100-6800
Telecoil çıkışı, 1 mA/m alan (1000 Hz) (dB SPL)	75	85	84
Telecoil çıkışı, HFA SPLITS L/R (dB SPL)	100	97	91
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 500 Hz (%)	<4	<4	<2
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 70 dB SPL), 800 Hz (%)	<3	<2	<2
Toplam harmonik distorsiyon (Giriş 65 dB SPL), 1600 Hz (%)	<2	<2	<2
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, Omni (dB SPL)	17	19	21
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, Dir (dB SPL)	29	*	*
Pil tüketimi, Tipik (mA) ²	2,0	1,9	2,0
Pil tüketimi, Durağın (mA) ²	1,9	1,9	1,9
Pil ömrü, yapay ölçüm, saat ³	90	95	90
Beklenen pil ömrü, saat (pil boyutu 312 - IEC PR41) ⁴	50-55	*	*

* Hiçbir ölçüm gerçekleştirilmedi.

- 1) İşitme cihazlarının kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdan eksi 20 dB ayarına göre ve 70 dB'lik bir SPL girdisiyle ölçülmüştür. Bu ölçüm şekli, feedback etkisi olmadan örneğin; IEC 60118-0:1983+A1:1994'den tam kazanç yanıtına eşdeğer bir kazanç yanıtı elde etmek için uygulanmıştır.
- 2) Pil akımı 3 dakikalık yatışma süresinden sonra IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22:2014 §6.13'e göre ölçülmüştür.
- 3) Standartlaştırılmış pil tüketimi ölçümüne dayanmaktadır (örn. IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). Gerçek pil ömrü, pilin kalitesine, kullanın şekline, etkin özellik kurulumuna, işitme kaybına ve ses çevresine bağlıdır.
- 4) Gerçek kullanımda pil ömrü değişken amplifikasyon ayarları ve bir TV'den doğrudan stereo akış (zamanın %25'i) ve bir cep telefonundan akış (zamanın %6'sı) dahil olmak üzere değişken giriş seviyeleri ile karma kullanım durumlarına göre tahmini bir zaman aralığını göstermektedir.

Notlar

Notlar


İŞBU BELGE, İSLİNDAN - FOTOKOPİ - FAX METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Boke.....YEMİN MÜTERCİM



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka

Genel merkez
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka

2772241TR / 2024.06.14 / v1

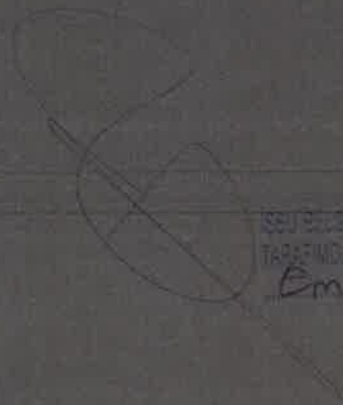

SEUTERBE VS. KONGEBACKEN - FAX METNİNDEN
TARAFINDAN İNŞA ZGİDEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİLMİŞTİR
Emrah Beker YEMİNLİ MÜTEREDİM

Technical data

Oticon Jet PX 1 | 2 miniBTE T

Oticon Jet PX miniBTE T is small in size and fits most ears. It comes with an LED light for easy handling. The style features telecoil and a single push-button, and it is powered by a disposable zinc-air battery. It is a Made

for iPhone hearing aid and compatible with the Android protocol for Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) - making it possible to stream directly from iPhone, iPad, Mac and select Android™ devices.



İŞBU BELGE ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX METNİNDEN
TABAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah B. İler... YEMİNLİ MÜTERCİM

Hook



miniBTE T

Corda miniFit 1.3 mm



miniBTE T

Corda miniFit 0.9 mm



miniBTE T

Technical features

- › Hands-free communication¹
- › Direct streaming²
- › Bluetooth Low Energy technology
- › NFMI (Near-Field Magnetic Induction)
- › Telecoil
- › Hydrophobic coating
- › Corda miniFit

Accessories

- › Oticon Companion app
- › ConnectClip
- › EduMic
- › TV Adapter 3.0
- › Phone Adapter 2.0

General Features

- › Digital Programmable
- › Automatic or Manual Volume Control
- › Maximum Output Control System
- › MPO-Maximum Power Output
- › GC-Gain Control
- › AGC-Automatic Gain Control
- › Noise Reduction
- › Feedback Management
- › Dual Microphone
- › FM Compatible(with Telecoil)
- › 4 Programs

For information on compatibility, please visit www.oticon.global/compatibility

Operating and charging conditions

Temperature: +1°C to +40°C (34°F to 104°F)
Humidity: 5% to 93% relative humidity,
non-condensing
Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

Transportation and storage conditions

Temperature and humidity shall not exceed the
mentioned limits for extended periods during
transportation and storage:

Transport

Temperature: -25°C to + 60°C (-13°F to 140°F)
Humidity: 5% to 93% relative humidity,
non-condensing
Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

Storage

Temperature: -25°C to + 60°C (-13°F to 140°F)
Humidity: 5% to 93% relative humidity,
non-condensing
Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

1) Hands-free communication is available on select devices
2) From iPhone, iPad, Mac and select Android devices

WARNING: No modification of this equipment is allowed.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.




IP68

oticon
life-changing technology

Fitting ranges

Oticon Jet PX 1 | 2

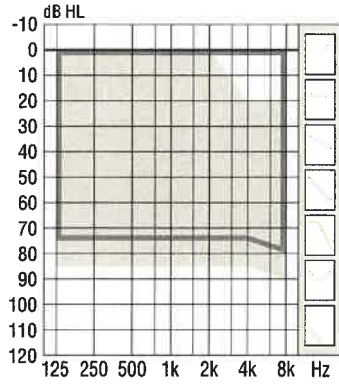

85

Hook
Corda minifit

İŞBU BELGE ASLINDAN FOTOKOPİ - FAX METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Bile YEMİNLİ MÜTERCİM

Feature overview

	Jet PX 1	Jet PX 2
Speech understanding		
OpenSound Navigator™	•	–
Balancing power effect	40%	–
Max. noise removal complex/simple	6 dB / 0 dB	–
Multiband Adaptive Directionality	–	•
Noise Reduction	–	•
Speech Guard™	•	–
Single Compression	–	•
Frequency lowering	Speech Rescue™	Speech Rescue™
Sound quality		
Fitting Bandwidth ¹	8 kHz	8 kHz
Power Bass (streaming)	•	•
Processing Channels	48	48
Listening comfort		
Feedback-Management	SuperShield & Feedback shield	SuperShield & Feedback shield
Transient Noise Management	On/Off	–
Wind Noise Management	•	•
Personalisation & optimised fitting		
Fitting Bands	14	12
Multiple Directionality options	•	•
Adaptation Management	•	•
Fitting Formulas	NAL-NL1/ NAL- NL2, DSL v5	NAL-NL1/ NAL- NL2, DSL v5
Connecting to the world		
Hands-free communication ²	•	•
Direct streaming ³	•	•
Oticon Companion app	•	•
ConnectClip	•	•
EduMic	•	•
Remote Control 3.0	•	•
TV Adapter 3.0	•	•
Phone Adapter 2.0	•	•
Tinnitus SoundSupport™	•	•
CROS/BICROS support	•	•

İŞBU BELGE, ASLINDAN FOTOKOPİ - FAX - METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah B. Ke... YEMİNLİ MÜTERCİM

1) Bandwidth accessible for gain adjustments during fitting
2) Hands-free communication is available on select devices
3) From iPhone, iPad, Mac and select Android devices

Oticon Jet PX 1 | 2 miniBTE T

Ear Simulator






Measured according to IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV and IEC 60318-4:2010



Technical information
Omnidirectional mode is used unless otherwise stated.

Hook/ Corda miniFit 1.3
— Acoustic input: 60 dB SPL
- - - Magnetic input: 31.6 mA/m

Corda miniFit 0.9
— Acoustic input: 60 dB SPL
- - - Magnetic input: 31.6 mA/m

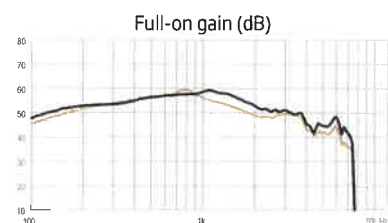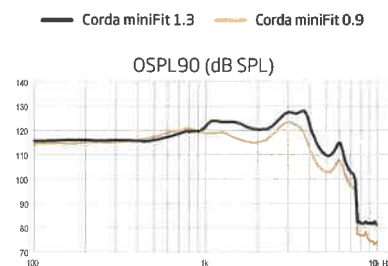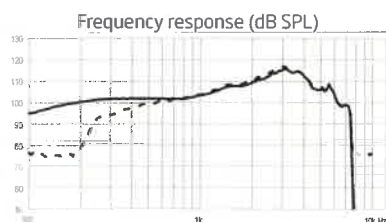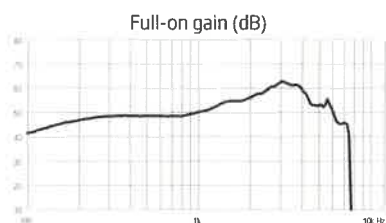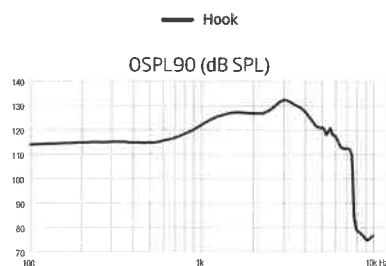

	Hook	Corda miniFit 1.3	Corda miniFit 0.9
OSPL90, Peak (dB SPL)	132	128	123
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	127	123	116
OSPL90, HFA (dB SPL)	126	122	118
Full-on gain, Peak (dB) ¹	63	59	59
Full-on gain, 1600 Hz (dB) ¹	55	56	52
Full-on gain, HFA (dB) ¹	55	55	52
Reference test gain (dB)	48	47	41
Frequency range (Hz)	100-7500	100-7500	100-7500
Telecoil output, 1 mA/m field (1600 Hz) (dB SPL)	86	88	87
Telecoil output, 10 mA/m field (1600 Hz) (dB SPL)	106	*	*
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 500 Hz (%)	<4	<5	<3
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 800 Hz (%)	<4	<2	<2
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 1600 Hz (%)	<2	<2	<3
Equivalent input noise level, Omni (dB SPL)	18	15	19
Equivalent input noise level, Dir (dB SPL)	28	*	*
Battery consumption, Typical (mA) ²	1.9	2.0	2.0
Battery consumption, Quiescent (mA) ²	1.9	1.9	1.9
Battery life, artificial measurement, hours ³	95	90	90
Expected battery life, hours (battery size 312 - IEC PR41) ⁴	50-55	*	*

* No measurement performed.

- 1) Measured with the gain control of the hearing aids set to their full-on position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB. This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994 but without influence of feedback.
- 2) Battery current is measured according to IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 and ANSI S3.22:2014 §6.13 after a settling time of minimum 3 minutes.
- 3) Based on the standardised battery consumption measurement (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). The actual battery life depends on battery quality, use pattern, active feature set, hearing loss and sound environment.
- 4) Real usage battery life is shown as an estimated interval based on mixed use cases with variable amplification settings and variable input levels, incl. direct stereo streaming from a TV (25% of the time) and streaming from a mobile phone (5% of the time).

Oticon Jet PX 1 | 2 miniBTE T

İŞBU BELGE, ASLINDAN FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Bile YEMİNLİ MÜTERCİM

2CC Coupler






Measured according to ANSI S3.22-2014,
IEC 60118-0:2015 and IEC 60318-5:2006



Technical information
Omnidirectional mode is used
unless otherwise stated.

Hook / Corda miniFit 1.3
— Acoustic input: 60 dB SPL
--- Magnetic input: 31.6 mA/m

Corda miniFit 0.9
— Acoustic input: 60 dB SPL
--- Magnetic input: 31.6 mA/m

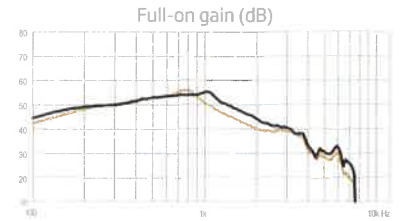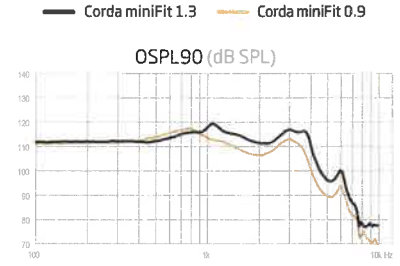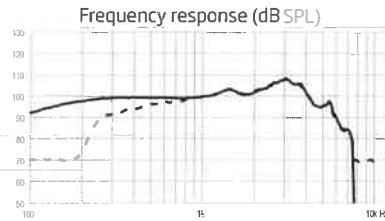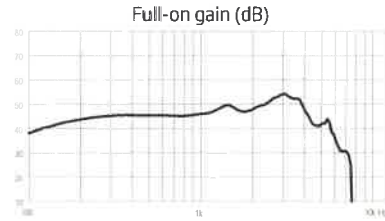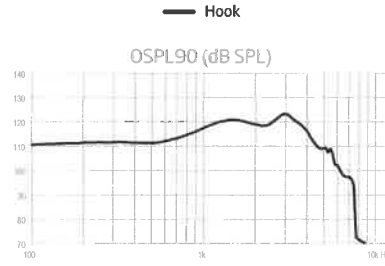


	Hook	Corda miniFit 1.3	Corda miniFit 0.9
OSPL90, Peak (dB SPL)	123	119	117
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	121	114	108
OSPL90, HFA (dB SPL)	119	115	110
Full-on gain, Peak (dB) ¹	54	55	56
Full-on gain, 1600 Hz (dB) ¹	48	48	44
Full-on gain, HFA (dB) ¹	48	48	44
Reference test gain (dB)	42	37	34
Frequency range (Hz)	100-7300	100-6300	100-6800
Telecoil output, 1 mA/m field (1000 Hz) (dB SPL)	75	85	84
Telecoil output, HFA SPLITS L/R (dB SPL)	100	97	91
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 500 Hz (%)	<4	<4	<2
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL), 800 Hz (%)	<3	<2	<2
Total harmonic distortion (Input 65 dB SPL), 1600 Hz (%)	<2	<2	<2
Equivalent input noise level, Omni (dB SPL)	17	19	21
Equivalent input noise level, Dir (dB SPL)	29	*	*
Battery consumption, Typical (mA) ²	2.0	1.9	2.0
Battery consumption, Quiescent (mA) ²	1.9	1.9	1.9
Battery life, artificial measurement, hours ³	90	95	90
Expected battery life, hours (battery size 312 - IEC PR41) ⁴	50-55	*	*

* No measurement performed.

- 1) Measured with the gain control of the hearing aids set to their full-on position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB. This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from e.g. IEC 60118-0:1983+A1:1994 but without influence of feedback.
- 2) Battery current is measured according to IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 and ANSI S3.22:2014 §6.13 after a settling time of minimum 3 minutes.
- 3) Based on the standardised battery consumption measurement (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). The actual battery life depends on battery quality, use pattern, active feature set, hearing loss and sound environment.
- 4) Real usage battery life is shown as an estimated interval based on mixed use cases with variable amplification settings and variable input levels, incl. direct stereo streaming from a TV (25% of the time) and streaming from a mobile phone (6% of the time).

İŞBU BELGE, ASLINDAN -F-

Notes

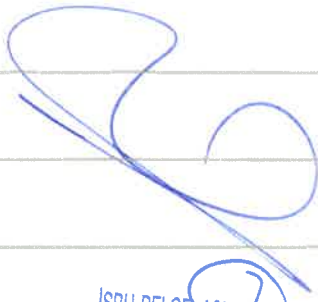

İŞBU BELGE, ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFIMDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.
Emrah Belge YEMİNLİ MÜTERCİM



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

Headquarters
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

277225TR-UK / 2024.07.15 / v1

İELİTİSİS YONUNDAKİLER FAK METNİNDEN
HİFİSİS NOLARDEEN TİNGEYE OVRILMISTIR
Emrah Beke YEMAL NOTERİM